

# Instrução de Uso MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

# INSTRUÇÃO DE USO



#### Fabricado por

MCI – Medical Concept Innovation Inc. Adress: 4592 North Hiatus Road, Sunrise/FL,

Zip Code: 33351 - USA



#### Importado por

Traumaserv Comércio Importação e Exportação Ltda Endereço: Rua 6, nº 1460, sala 27 - 2º andar, Ed. São

Lucas, Centro, Rio Claro/SP CEP: 13500-190

CNPJ: 26.278.328./0001-68

Verifique a revisão da Instrução de Uso disponível no site www.traumaserv.com.br, pois deve ser a mesma da rotulagem do produto. A Instrução de Uso de forma eletrônica está disponível para download através do site ou solicitada impressa pelo e-mail: contato@traumaserv.com.br ou pelo fone: +55 (19) 3597-3797, sem custo adicional, inclusive de envio, conforme requisitos determinados pela norma IN n° 4 de 2012.

Nome Comercial: MCI - CMF System Placas Especiais

Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados

Material: Placas e Telas fabricadas com Titânio Puro conforme norma ASTM F67 (Grau 1 e 2) e Parafusos

fabricados com Liga de Titânio Ti-6Al-4V conforme norma ASTM F136

Produto não estéril - Esterilizar antes do uso

Método indicado: Esterilização a Vapor

Validade: Indeterminada

Produto de Uso Único - PROIBIDO REPROCESSAR

Uso em ambiente de Ressonância Magnética: Uso Condicional

#### 1. Descrição do produto médico

O MCI - CMF System Placas Especiais é um dispositivo médico implantável, não ativo, invasivo cirurgicamente, de uso único, que se caracteriza como um sistema aberto formado por Parafusos manufaturados em Liga de Titânio, conforme a norma ASTM F136, e por Placas e Telas manufaturadas em Titânio Puro, conforme a norma ASTM F67.

O Sistema possui vários tamanhos de parafusos, placas e telas, adequados à finalidade de uso, possibilitando ao médico cirurgião uma gama maior de possibilidades, de modo a atender as diversas necessidades cirúrgicas do segmento Bucomaxilofacial.



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

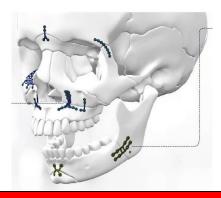


Ilustração do Sistema e exemplos de aplicações para os parafusos e placas

## 1.1 Fundamentos de funcionamento e ação

O sistema de placas e parafusos MCI - CMF System Placas Especiais, consiste em implantes metálicos utilizados para cirurgias no segmento Bucomaxilofacial indicados para fixação de fraturas, osteotomias e procedimentos de reconstrução que requerem estabilidade posicional e funcional. O tratamento com placas e parafusos proporciona uma fixação interna estável, objetiva a recuperação completa, e o retorno da função imediata da região lesada. Neste sentido, o uso de placas e parafusos é a melhor alternativa para essa finalidade, pois fornece estabilidade à estrutura óssea, estimulando uma osteogênese associada à função.

## 1.2 Forma de Apresentação Comercial

Os componentes do sistema MCI - CMF System Placas Especiais são acondicionados unitariamente em embalagem de filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), na condição de produto não estéril. O sistema contém os modelos e dimensões descritos abaixo, demonstrando a variabilidade dos produtos, de modo a atender as necessidades cirúrgicas do segmento em questão.

ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
	A01.01.1017	MICRO PLACA L PONTE 6MM 4F DIREITA				
	A01.01.1019	MICRO PLACA L PONTE 8MM 4F DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1021	MICRO PLACA L PONTE 10MM 4F DIREITA				
	A01.01.1018	MICRO PLACA L PONTE 6MM 4F ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm		
9000	A01.01.1020	MICRO PLACA L PONTE 8MM 4F ESQUERDA			Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1022	MICRO PLACA L PONTE 10MM 4F ESQUERDA				
0.5000	A01.01.1043	MICRO PLACA L OBLIQUA PONTE 8MM 4F DIREITA	Titânio Puro Grau 2	0,6 mm	Azul	Sistama 1 5
	A01.01.1051	MICRO PLACA L OBLIQUA PONTE 8MM 5F DIREITA	ASTM F67	0,0 111111	Azui	Sistema 1.5



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
99900	A01.01.1044	MICRO PLACA L OBLIQUA PONTE 8MM 4F ESQUERDA MICRO PLACA L OBLIQUA PONTE 8MM 5F ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1089	MICRO PLACA LEFORT 11F #0,6MM ESQUERDA				
	A01.01.1091	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 2MM #0,6MM ESQUERDA				
655	A01.01.1095	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 4MM #0,6MM ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1099	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 6MM #0,6MM ESQUERDA				
	A01.01.1103	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 8MM #0,6MM ESQUERDA				
932 September 1	A01.01.1090	MICRO PLACA LEFORT 11F #0,6MM DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1092	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 2MM #0,6MM DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67			Sistema 1.5
	A01.01.1096	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 4MM #0,6MM DIREITA		0,6 mm	Azul	
	A01.01.1100	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 6MM #0,6MM DIREITA		0,0 11111	AZMI	
	A01.01.1104	MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 8MM #0,6MM DIREITA				
98	A01.01.1137	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME #0,6MM DIREITA	Titânio Puro Grau 2	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
000000	A01.01.1138	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME #0,6MM ESQUERDA	ASTM F67	0,0 111111	Azui	Sistema 1.5
	A01.01.1139	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 2MM #0,6MM DIREITA				
88	A01.01.1143	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 4MM #0,6MM DIREITA	Titânio Puro	0,6 mm	A 1	Sigtage 4.5
	A01.01.1145	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 6MM #0,6MM DIREITA	Grau 2 ASTM F67		Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1147	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 8MM #0,6MM DIREITA				



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
68	A01.01.1149 A01.01.1153	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 10MM #0,6MM DIREITA MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
		12MM #0,6MM DIREITA MICRO PLACA ANGULADA PARA				
	A01.01.1140	PIRIFORME AVANÇO 2MM #0,6MM ESQUERDA MICRO PLACA				
	A01.01.1144	ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 4MM #0,6MM ESQUERDA				
000000	A01.01.1146	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 6MM #0,6MM ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
66	A01.01.1148	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 8MM #0,6MM ESQUERDA	ASTM F67			
	A01.01.1150	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 10MM #0,6MM ESQUERDA				
	A01.01.1154	MICRO PLACA ANGULADA PARA PIRIFORME AVANÇO 12MM #0,6MM ESQUERDA				
e <sub>eee</sub>	A01.01.1248	MICRO PLACA ORBITAL 8F	Titânio Puro Grau 2	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
96	A01.01.1249	MICRO PLACA ORBITAL 10F	ASTM F67	-,-	-	Olotoma 1.0
-6	A01.01.1287	MICRO PLACA T PONTE 6MM 4F	Tito dia Bassa			
0,00	A01.01.1291	MICRO PLACA T PONTE 6MM 5F	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1292	MICRO PLACA T PONTE 8MM 5F				
68	A01.01.1328 A01.01.1330	MICRO PLACA X PONTE 5MM MICRO PLACA X	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
9	A01.01.1335	MICRO PLACA Y PONTE 8MM 5F	Titânio Puro			
000	A01.01.1336	MICRO PLACA Y PONTE 10MM 5F	Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1345	MICRO PLACA SUPORTE ZIGOMATICO DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,8 mm	Azul	Sistema 1.5



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
	A01.01.1346	MICRO PLACA SUPORTE ZIGOMATICO ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,8 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1359	MICRO PLACA NASAL H 12F	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1360	MICRO PLACA NASAL I 11F	Titânio Puro Grau 2	0,6 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.1361	MICRO PLACA NASAL I 12F	ASTM F67	0,0 111111	Azui	Sistema 1.5
	A01.01.1396	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 10MM #0,6 DIREITA				
	A01.01.1398	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 14MM #0,6 DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Lilás	Sistema 1.5
	A01.01.1400	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 18MM #0,6 DIREITA				
0	A01.01.1397	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 10MM #0,6 ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67			Sistema 1.5
8	A01.01.1399	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 14MM #0,6 ESQUERDA		0,6 mm	Lilás	
-06	A01.01.1401	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 18MM #0,6 ESQUERDA				
9	A01.01.1402	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 10MM #0,7 DIREITA				Sistema 1.5
Î	A01.01.1404	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 14MM #0,7 DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,7 mm	Azul	
000	A01.01.1406	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 18MM #0,7 DIREITA				
Q.	A01.01.1403	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 10MM #0,7 ESQUERDA				
	A01.01.1405	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 14MM #0,7 ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,7 mm	Azul	Sistema 1.5
-06	A01.01.1407	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 18MM #0,7 ESQUERDA				
9	A01.01.1408	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 10MM #0,8 DIREITA				
8	A01.01.1410 MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 14MM #0,8 DIREITA	ORBITAL OBLIQUA PONTE 14MM #0,8 DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	Grau 2 0,8 mm	Natural	Sistema 1.5
000	A01.01.1412	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 18MM #0,8 DIREITA				



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
900	A01.01.1409	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 10MM #0,8 ESQUERDA MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 14MM #0,8 ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,8 mm	Natural	Sistema 1.5
-06	A01.01.1413	MICRO PLACA L ORBITAL OBLIQUA PONTE 18MM #0,8 ESQUERDA				
	A01.01.3010	ASSOALHO ORBITAL	Titânio Puro Grau 1 ASTM F67	0,3 mm	Azul	Sistema 1.5
889	A01.01.2014	MINI PLACA ANGULAR DUPLA 10° BSSO PONTE 10,5MM DF	Titânio Puro Grau 2	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
560	A01.01.2015	MINI PLACA ANGULAR DUPLA 10° BSSO PONTE 13,5MM DF	ASTM F67	1,0 111111	Amareio	Sistema 2.0
	A01.01.2016	MINI PLACA ANGULAR DUPLA 10° BSSO PONTE 16,5MM DF				
88	A01.01.2026	MINI PLACA ANGULAR DUPLA 20° BSSO PONTE 10,5MM DF	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
28	A01.01.2027	MINI PLACA ANGULAR DUPLA 20° BSSO PONTE 13,5MM DF		1,0 mm	Amareio	
	A01.01.2028	MINI PLACA ANGULAR DUPLA 20° BSSO PONTE 16,5MM DF				
9000	A01.01.2075	MINI PLACA L 4F DF	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2077	MINI PLACA L 6F DF	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2101	MINI PLACA L PONTE 9MM 4F DF				
00	A01.01.2103	MINI PLACA L PONTE 12MM 4F DF	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2107	MINI PLACA L PONTE 18MM 4F DF				
	A01.01.2155	MINI PLACA L PONTE 9MM 6F DF	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
000	A01.01.2263	MINI PLACA L OBLIQUA PONTE 9MM 6F DF	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Amarelo	Sistema 2.0
6-	A01.01.2300	MINI PLACA ORBITAL 6F	T'. 2 . 5			
6666	A01.01.2301	MINI PLACA ORBITAL 8F	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2302	MINI PLACA ORBITAL 10F				



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA	
	A01.01.2303 A01.01.2305	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 2MM MINI PLACA PARA					
	A01.01.2306	MENTO CHIN 4MM MINI PLACA PARA					
	A01.01.2307	MENTO CHIN 5MM MINI PLACA PARA MENTO CHIN 6MM					
	A01.01.2308	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 7MM					
	A01.01.2309	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 8MM					
08	A01.01.2310	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 9MM	Titânio Puro				
70	A01.01.2311	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 10MM	Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Azul	Sistema 2.0	
0	A01.01.2312	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 11MM					
	A01.01.2313	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 12MM					
	A01.01.2314	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 13MM					
	A01.01.2315	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 14MM					
	A01.01.2316	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 15MM					
	A01.01.2317	MINI PLACA PARA MENTO CHIN 16MM					
GE CONTROL	A01.01.2352	MINI PLACA SAGITAL	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0	
6	A01.01.2354	MINI PLACA LINHA DUPLA PONTE 10,5MM 8F				Sistema 2.0	
626	A01.01.2355	MINI PLACA LINHA DUPLA PONTE 13,5MM 8F	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Azul		
	A01.01.2356	MINI PLACA LINHA DUPLA PONTE 16,5MM 8F					
686	A01.01.2387	MINI PLACA T 4F	Titânio Puro Grau 2	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0	
66	A01.01.2389	MINI PLACA T 6F	ASTM F67	1,0 11111	Amareio	Sistema 2.0	
62	A01.01.2495	MINI PLACA Y 5F	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Amarelo	Sistema 2.0	
	A01.01.2511	MINI PLACA S/Z 6,5MM DF					
000	A01.01.2512	MINI PLACA S/Z 9MM DF	Titânio Puro Grau 2	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0	
	A01.01.2513	MINI PLACA S/Z 12MM DF	ASTM F67				
600000	A01.01.2617	MINI PLACA T ORBITAL PONTE 9MM 8F	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Amarelo	Sistema 2.0	



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
	A01.01.2655 A01.01.2656	MINI PLACA MENTO AVANÇO 2MM TAB MINI PLACA MENTO AVANÇO 3MM TAB				
606	A01.01.2657	MINI PLACA MENTO AVANÇO 4MM TAB				
SIL	A01.01.2658	MINI PLACA MENTO AVANÇO 5MM TAB	Titânio Puro Grau 2	0,8 mm	Amarelo	Sistema 2.0
600	A01.01.2659	MINI PLACA MENTO AVANÇO 6MM TAB	ASTM F67			
	A01.01.2660	MINI PLACA MENTO AVANÇO 8MM TAB				
	A01.01.2661	MINI PLACA MENTO AVANÇO 10MM TAB				
	A01.01.2662	MINI PLACA L PONTE 9MM ESQUERDA TAB				
0	A01.01.2663	MINI PLACA L PONTE 13,5MM ESQUERDA TAB	Titânio Puro Grau 2	0,9 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2664	MINI PLACA L PONTE 17,5MM ESQUERDA TAB	ASTM F67	0,9 11111	Amareio	
	A01.01.2665	MINI PLACA L PONTE 21,5MM ESQUERDA TAB				
	A01.01.2666	MINI PLACA L PONTE 9MM DIREITA TAB	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67			
0	A01.01.2667	MINI PLACA L PONTE 13,5MM DIREITA TAB		0,9 mm	Amarelo	Sistema 2.0
\$	A01.01.2668	MINI PLACA L PONTE 17,5MM DIREITA TAB		.,	Amareio	Sistema 2.0
	A01.01.2669	MINI PLACA L PONTE 21,5MM DIREITA TAB				
9	A01.01.2670	MINI PLACA L PONTE 12MM DUPLA DIREITA TAB		0,9 mm		Sistema 2.0
	A01.01.2671	MINI PLACA L PONTE 15MM DUPLA DIREITA TAB	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67		Amarelo	
0 0	A01.01.2672	MINI PLACA L PONTE 20MM DUPLA DIREITA TAB				
	A01.01.2915	MINI PLACA CORTE SAGITAL OBLONGO PONTE 7MM				
	A01.01.2916	MINI PLACA CORTE SAGITAL OBLONGO PONTE 9MM				
	A01.01.2917	MINI PLACA CORTE SAGITAL OBLONGO PONTE 11MM				
	A01.01.2918	MINI PLACA CORTE SAGITAL OBLONGO PONTE 13MM	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2919	MINI PLACA CORTE SAGITAL OBLONGO PONTE 15MM				
	A01.01.2920	MINI PLACA CORTE SAGITAL OBLONGO PONTE 16MM				
	A01.01.2921	MINI PLACA CORTE SAGITAL OBLONGO PONTE 19MM				



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
	A01.01.2922	MINI PLACA CORTE SAGITAL PONTE 7MM				
	A01.01.2923	MINI PLACA CORTE SAGITAL PONTE 9MM				
	A01.01.2924	MINI PLACA CORTE SAGITAL PONTE 11MM				
0000	A01.01.2925	MINI PLACA CORTE SAGITAL PONTE 13MM	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2926	MINI PLACA CORTE SAGITAL PONTE 15MM				
	A01.01.2927	MINI PLACA CORTE SAGITAL PONTE 16MM				
	A01.01.2928	MINI PLACA CORTE SAGITAL PONTE 19MM				
~~~ <u>1</u>	A01.01.2929	MINI PLACA LAMBDA DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
800	A01.01.2930	MINI PLACA LAMBDA ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
Ž.	A01.01.2931	MINI PLACA SUPORTE DIREITA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
)S	A01.01.2932	MINI PLACA SUPORTE ESQUERDA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2933	MINI PLACA TRAPEZOIDAL	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2937	MINI PLACA TRAPEZOIDAL PARALELA	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2939	MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 2MM				
	A01.01.2940	MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 3MM				Sistema 2.0
	A01.01.2941	MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 4MM	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Amarelo	
	A01.01.2942	MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 5MM				
	A01.01.2943	MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 6MM				



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	ESPESSURA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
	A01.01.2944 A01.01.2945 A01.01.2946 A01.01.2947	MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 7MM MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 8MM MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 9MM MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 10MM MINI PLACA DUPLO AVANÇO 10MM MINI PLACA DUPLO	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,9 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2948 A01.01.2949	PILAR PARA MENTO AVANÇO 11MM MINI PLACA DUPLO PILAR PARA MENTO AVANÇO 12MM				
00000	A01.01.2950	MINI PLACA LAMBDA DF	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
2	A01.01.2951	MINI PLACA SUPORTE	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.4020	MICRO TELA 3D 50X50 #0,6MM				
	A01.01.4021	MICRO TELA 3D 83X83 #0,6MM	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,6 mm	Natural	Sistema 1.5
	A01.01.4022	MICRO TELA 3D 122X122 #0,6MM				
	A01.01.4023	MICRO TELA 3D 200X200 #0,6MM				
	A01.01.4053	MICRO MALHA PARA ASSOALHO DA ÓRBITA #0,3MM	Titânio Puro Grau 1 ASTM F67	0,3 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.4054	MICRO MALHA PARA ASSOALHO DA ÓRBITA #0,5MM	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	0,5 mm	Azul	Sistema 1.5
655	A01.01.2649	MINI PLACA STR 6F PONTE TAB	Titânio Puro Grau 2 ASTM F67	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
<i>هی</i> ا	A01.01.2650	MINI PLACA STR 4F PONTE 12MM TAB				
	A01.01.2651	MINI PLACA STR 4F PONTE 16.5MM TAB	Titânio Puro Grau 2	1,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
	A01.01.2652	MINI PLACA STR 4F PONTE 21.5MM TAB	ASTM F67	.,5		2.2.5
	A01.01.2653	MINI PLACA STR 4F PONTE 26.5MM TAB				



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	DIÂMETRO DA ROSCA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
	A01.01.0000	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 4MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0001	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 5MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0002	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 6MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0004	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 8MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0005	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 9MM-TI-CROSS- DRIVE	Liga de Titânio			
Sim	A01.01.0006	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 10MM-TI-CROSS- DRIVE	Ti-6AI-4V ASTM F136	1,5 mm	Azul	Sistema 1.5
	A01.01.0007	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 11MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0008	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 12MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0010	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 14MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0011	PARAFUSO CORTICAL 1,5 X 15MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0018	PARAFUSO CORTICAL 1,7 X 5MM-TI-CROSS- DRIVE		1,7 mm		
	A01.01.0019	PARAFUSO CORTICAL 1,7 X 6MM-TI-CROSS- DRIVE				
Similar	A01.01.0021	PARAFUSO CORTICAL 1,7 X 8MM-TI-CROSS- DRIVE	Liga de Titânio Ti-6AI-4V ASTM F136		Lilás	Sistema 1.5
	A01.01.0023	PARAFUSO CORTICAL 1,7 X 10MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0025	PARAFUSO CORTICAL 1,7 X 12MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0205	PARAFUSO CORTICAL AP 1,5 X 4MM-TI- CROSS-DRIVE				
Salta.	A01.01.0206	PARAFUSO CORTICAL AP 1,5 X 5MM-TI- CROSS-DRIVE	Liga de Titânio	4.5	\/o-d-	Sistem - 4.5
	A01.01.0207	PARAFUSO CORTICAL AP 1,5 X 6MM-TI- CROSS-DRIVE	Ti-6Al-4V ASTM F136	1,5 mm	Verde	Sistema 1.5
	A01.01.0208	PARAFUSO CORTICAL AP 1,5 X 7MM-TI- CROSS-DRIVE				



ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA- PRIMA	DIÂMETRO DA ROSCA	IONIZADO NA COR	SISTEMA
	A01.01.0034	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 4MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0035	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 5MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0036	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 6MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0038	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 8MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0040	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 10MM-TI-CROSS- DRIVE	Liga de Titânio	2,0 mm	Amarelo	Sistema 2.0
9	A01.01.0042	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 12MM-TI-CROSS- DRIVE	Ti-6Al-4V ASTM F136	_, _,		
	A01.01.0044	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 14MM-TI-CROSS- DRIVE				Sistema 2.0
	A01.01.0046	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 16MM-TI-CROSS- DRIVE	TI-CROSS- CORTICAL TI-CROSS-			
	A01.01.0048	PARAFUSO CORTICAL 2,0 X 18MM-TI-CROSS- DRIVE PARAFUSO CORTICAL				
	A01.01.0050	2,0 X 20MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0052	2,3 X 5MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0053	2,3 X 6MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0055	2,3 X 8MM-TI-CROSS- DRIVE				
	A01.01.0057	2,3 X 10MM-TI-CROSS- DRIVE	Liga de			
Sign	A01.01.0059	2,3 X 12MM-TI-CROSS- DRIVE PARAFUSO CORTICAL	Titânio Ti-6Al-4V - ASTM F136	2,3 mm	Lilás	Sistema 2.0
	A01.01.0061	2,3 X 14MM-TI-CROSS- DRIVE PARAFUSO CORTICAL				
	A01.01.0063	2,3 X 16MM-TI-CROSS- DRIVE PARAFUSO CORTICAL				
	A01.01.0065	2,3 X 18MM-TI-CROSS- DRIVE PARAFUSO CORTICAL				
	A01.01.0067	2,3 X 20MM-TI-CROSS- DRIVE PARAFUSO CORTICAL				
	A01.01.0216	AP 2,0 X 4MM-TI- CROSS-DRIVE PARAFUSO CORTICAL	Liga de			
Benz	A01.01.0217	AP 2,0 X 5MM-TI- CROSS-DRIVE PARAFUSO CORTICAL	Titânio Ti-6AI-4V - ASTM F136	2,0 mm	Verde	Sistema 2.0
	A01.01.0218	AP 2,0 X 6MM-TI- CROSS-DRIVE				



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

A escolha dos componentes do sistema a serem utilizados durante o procedimento cirúrgico é de responsabilidade do cirurgião, assim como, o conhecimento e domínio da técnica cirúrgica a ser utilizada, devendo estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado. A correta seleção e colocação dos parafusos são a chave para a estabilização bem-sucedida. A melhor placa é inútil se não for corretamente fixada com parafusos, sendo de total responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os modelos de componentes a serem utilizados.

#### 1.3 Composição

No desenvolvimento de um produto implantável é fundamental a escolha de matéria-prima com características biológicas adequadas à utilização em seres humanos, assim como a observância de características que venham a atender as necessidades físicas e/ou mecânicas relacionadas ao uso pretendido deste produto e às possíveis intercorrências no seu uso diário. Pautado nas considerações acima, o Titânio é sem dúvida o material que confere maiores vantagens na concepção do produto, sendo elas:

- Material radiopaco aos raios X, facilitando outros diagnósticos, em contrapartida aos implantes não radiopacos;
- Facilidade no estudo do paciente com Radiografia ou Tomografia Computadorizada (TC);
- Elasticidade e maleabilidade, adaptando adequadamente ao contorno ósseo.

#### 1.4.1 Parafusos

Os parafusos componentes do sistema MCI - CMF System Placas Especiais são manufaturados em Liga de Titânio Ti-6Al-4V, conforme especificações da norma ASTM F136 - Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNS R56401).

#### 1.4.2 Placas e Telas

As placas e telas que compõem o sistema MCI - CMF System Placas Especiais são manufaturadas em Titânio Puro (Grau 1 e 2), conforme as especificações da norma ASTM F67 - Standard Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications (UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700).

## 1.5 Compatibilidade de materiais

Devem ser utilizados implantes do mesmo fabricante, pois os mesmos foram projetados para tais combinações, observando acabamento, tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos, como geometrias, materiais utilizados, tecnologia etc., que podem interferir nas combinações, vida útil do produto ou causar interferências ao paciente ou no procedimento cirúrgico.



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

#### 1.6 Compatibilidade entre os produtos do sistema

O MCI - CMF System Placas Especiais é subdividido em sistema 1,5mm e sistema 2,0mm.

COMPONENTE DO SISTEMA	UTILIZADOS EM CONJUNTO
PLACAS SISTEMA 1,5 "MICRO PLACAS"	PARAFUSOS DE Ø1,5mm OU SEU CORRESPONDENTE DE EMERGÊNCIA Ø1,7mm
PLACAS SISTEMA 2,0 "MINI PLACAS"	PARAFUSOS DE Ø2,0mm OU SEU CORRESPONDENTE DE EMERGÊNCIA Ø2,3mm
MALHAS E TELAS	PARAFUSOS DE Ø1,5mm OU SEU CORRESPONDENTE DE EMERGÊNCIA Ø1,7mm

#### 1.7 Instrumentais

Os instrumentais indicados para implantação dos componentes do sistema MCI - CMF System Placas Especiais não fazem parte desse processo de registro e devem ser adquiridos separadamente. Para isso, o usuário deve entrar em contato com a Traumaserv (Importador) para mais informações.

O usuário deve utilizar somente instrumentais da MCI, pois foram especialmente desenvolvidos e produzidos para utilização em conjunto com o produto.

Os instrumentais a seguir são fornecidos limpos, descontaminados, não estéreis, devendo ser esterilizados antes do uso, caso contrário, poderá acarretar infecções ao paciente.

A seguir, relação dos instrumentais disponibilizados para implantação do sistema MCI - CMF System Placas Especiais:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A02.01.0000	ALICATE DE CORTE 1.5, 2.0
A02.01.0800	CABO GUIA DO TRANSBUCAL SLIM 1.5, 2.0
A02.01.1413	RETRATOR DE BOCHECHA DO TRANSBUCCAL 1.5, 2.0
A02.01.0801	CABO ENGATE RÁPIDO 1.5, 2.0
A02.01.1409	TUBO PARA BROCA 1,5 - 2,0 SLIM
A02.01.1406	PUNÇÃO DO TRANSBUCAL SLIM 1,5 - 2,0
A02.01.1410	TUBO PARA PONTEIRA 1,5 - 2,0 SLIM
A02.01.0001	ALICATE DE MODELAÇÃO 1,5
A02.01.0002	ALICATE DE MODELAÇÃO 2,0
A02.01.1412	PINÇA PARA PLACAS 1.5, 2.0
A02.01.1414	POSICIONADOR DE PLACA 1.5, 2.0
A02.01.1403	MEDIDOR DE PROFUNDIDADE BMF 1.5, 2.0
A02.01.1401	GUIA DE BROCA DUPLO 1.5, 2.0
A02.01.0003	ALICATE DOBRADOR 1,5 - 2,0
A02.01.0603	PONTEIRA CROSS DRIVE 1,5 PARA CONTRA ÂNGULO
A02.01.0604	PONTEIRA CROSS DRIVE 2,0 PARA CONTRA ÂNGULO
A02.01.0600	PONTEIRA CROSS DRIVE 1,5
A02.01.0601	PONTEIRA CROSS DRIVE 2,0
A02.01.0605	PONTEIRA DE BLOQUEIO CROSS DRIVE 2,0
A03.11.0288	BROCA Ø1,5 X 50MM COM STOP 5MM ENGATE J-LATCH
A03.11.0292	BROCA Ø1,5 X 50MM COM STOP 20MM ENGATE J-LATCH
A03.11.0318	BROCA Ø1,5 X 100MM COM STOP 5MM ENGATE J-LATCH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A03.11.0322	BROCA Ø1,5 X 100MM COM STOP 20MM ENGATE J-LATCH
A03.11.0048	BROCA Ø1,1 X 50MM COM STOP 5MM ENGATE J-LATCH
A03.11.0052	BROCA Ø1,1 X 50MM COM STOP 20MM ENGATE J-LATCH
A03.11.0078	BROCA Ø1,1 X 100MM COM STOP 5MM ENGATE J-LATCH
A03.11.0082	BROCA Ø1,1 X 100MM COM STOP 20MM ENGATE J-LATCH
A02.01.0802	GUIA TRANSBUCAL SLIM 1.5-2.0
A02.01.2001	PINÇA FIXADORA DE PLACAS №2
A02.01.2002	PINÇA FIXADORA DE PLACAS №1
A02.01.2003	BROCA Ø1,8 X 50MM COM STOP 10MM ENGATE J-LATCH
A02.01.2004	BROCA Ø1,8 X 50MM COM STOP 20MM ENGATE J-LATCH
A02.01.2005	BROCA Ø1,8 X 100MM COM STOP 10MM ENGATE J-LATCH
A02.01.2006	BROCA Ø1,8 X 100MM COM STOP 20MM ENGATE J-LATCH
A02.01.2009	ALICATE DE CORTE TIPO 1
A02.01.2010	PUNÇÃO DO TRANSBUCAL
A02.01.2013	GUIA PARA BROCA SIMPLES
A02.01.2014	RETORCEDOR DE PLACAS TIPO 1
A02.01.2016	PARAFUSO PARA MODELAGEM DA PLACA DE #2MM CROSS DRIVE
A02.01.2017	PARAFUSO PARA MODELAGEM DA PLACA DE #2,5MM CROSS DRIVE
A02.01.2018	PARAFUSO PARA MODELAGEM DA PLACA DE #3mm CROSS DRIVE
A02.01.2019	PARAFUSO PARA MODELAGEM DA PLACA DE #3,2mm CROSS DRIVE



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A02.01.2020	ALICATE MODELADOR, RETORCEDOR E CORTADOR DE PLACAS
A02.01.2021	CORTADOR CIZALHADOR DE PLACAS
A02.01.2022	MODELADOR UNIVERSAL DE PLACAS
A02.01.2023	MODELADOR DE PLACAS - DIREITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A02.01.2024	MODELADOR DE PLACAS - ESQUERDO
A02.01.2025	ALICATE DE MODELAGEM PARA PLACAS - DIREITO
A02.01.2026	ALICATE DE MODELAGEM PARA PLACAS - ESQUERDO

Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal podendo quebrar-se ou apresentar defeitos de funcionamento, desse modo, devem ser regularmente inspecionados, prevenindo possíveis danos.

Os instrumentais são fabricados em aço inoxidável de alta resistência e durabilidade, e cumprem com os requisitos da norma ASTM F899 - Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments.

# 2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, segundo indicado pelo fabricante 2.1 Indicação de Uso

O sistema MCI - CMF System Placas Especiais são utilizadas para correção de fraturas, osteotomias de deslocamento, bem como segmentos de conexão de carga e reconstruções ósseas na região bucomaxilofacial (terço médio da face e mandíbula) que requerem estabilidade posicional e funcional. Dentre elas estão:

- Lefort I, II, III;
- · Ramo e corpo das osteotomias;
- Genioplastia

O critério de seleção do tamanho e geometria dos implantes depende das condições da porção óssea lesada, tipo da fratura e da técnica cirúrgica a ser empregada, que deve ser determinado pelo cirurgião responsável, sendo necessário o conhecimento técnico e experiência no tratamento de fraturas ou deformidades do segmento Bucomaxilofacial.

#### 2.2 Finalidade de uso

O objetivo do sistema MCI – CMF System Placas Especiais é promover a reconstrução e fixação das fraturas Bucomaxilofaciais e correções de deformidades.

#### 2.3 Desempenho previsto

O produto foi concebido para ser utilizado em cirurgias do segmento Bucomaxilofacial, projetados e manufaturados seguindo a tendência mundial no que há de melhor em tratamentos para fixação interna estável neste segmento. Sendo assim, o projeto do sistema MCI - CMF System Placas Especiais foi compatibilizado de acordo com sua aplicação, tendo seus componentes parametrizados com as solicitações mecânicas (tensão e tração) musculares sobre a região a qual serão submetidos, devidamente validados através de ensaios mecânicos.

Neste contexto, conhecendo a fisiologia do corpo e a compatibilidade dos produtos com suas respectivas aplicações, o produto está adequado ao uso pretendido, e será capaz de fornecer ao paciente a estabilidade óssea, necessária para reconstrução facial ou maxilar em deformidades congênitas ou adquiras, promovendo



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

a osteossíntese, até que se ocorra a osteogênese (consolidação óssea), finalizando assim o ciclo de vida do produto.

#### 2.4 Técnica Cirúrgica

#### 2.4.1 Moldagem da Placa


O produto pode ser moldado, quando necessário. O limite para a moldagem é a própria anatomia do osso em que será utilizado. As placas não devem ser dobradas em ângulos superiores a 25°.

As placas não devem ser dobradas em ângulos agudos, riscadas ou deformadas.

Uma vez moldadas não devem ser novamente moldadas para a sua forma original, o que pode resultar em fratura e consequentemente falha na função do produto.

Os implantes ortopédicos não têm a função de sustentar, parcial ou totalmente, as cargas normais diárias a que o membro que contém o osso reconstruído está exposto, tendo somente a função de servir como auxiliador no processo de consolidação óssea.

Os componentes do sistema têm indicação de reconstrução óssea, restabelecendo a sua forma e função original, proporcionando alinhamento, prevenindo a morbidade e melhorando a qualidade de vida do paciente. Abaixo estão algumas maneiras de modelar as placas em regiões próximas aos furos:

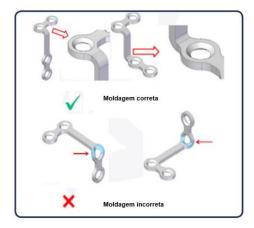

## - Limites de moldagem do implante

O limite para a moldagem é a própria anatomia do osso em que será utilizado. As placas não devem ser dobradas em ângulos superiores a 25°. Como protocolo de moldagem, cabe informar que os componentes placas e micro telas do sistema MCI - CMF System Placas Especiais não devem ser moldadas repetidas vezes no mesmo ponto, assim como também, em sentido contrário a dobra já realizada. A não observância desses fatores podem acarretar o enfraquecimento do implante, e consequentemente uma possível falha funcional ou fratura precoce do implante, impactando diretamente na vida útil do produto e acarretando complicações ao paciente.

### 2.4.2 Uso de Chave e Parafuso

Durante o manuseio dos instrumentais e implantes no momento da fixação dos parafusos ao tecido ósseo são necessárias algumas práticas para garantir o bom desempenho do produto e sua integridade, como as indicadas a seguir:



## MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

O primeiro passo é a empunhadura correta da chave de engate rápido.

A base do cabo deve estar entre os dois arcos transversos, o terceiro, quarto e quinto dedo deve pressionar o cabo, e o grampo primário do primeiro e segundo dedo deve girar o tambor do cabo.



Depois de engatar a chave de engate rápido no cabo, a chave deve ser inserida no encaixe do parafuso, após o encaixe é necessária uma leve pressão vertical para garantir o encaixe perfeito do componente



Ao realizar estas etapas é possível observar a qualidade da estabilidade alcançada entre os dois componentes do sistema.







Durante a escolha dos parafusos pode ser necessário retornar os parafusos à caixa, isto deve ser feito com movimentos circulares sem angulação aguda, pois podem danificar o encaixe dos parafusos e das pontas das chaves.



Os retornos de parafusos ao estojo não são indicados, mas se necessário, devem ser feitos com pouca angulação e movimentos circulares.



## 2.5 Contraindicações

O uso do sistema MCI - CMF System Placas Especiais estão contraindicados para implantação em pacientes com:

- Infecção pré-existente ou suspeita perto ou no local de implantação;
- · Infecção local ou sistêmica ativa;
- Alergias conhecidas e/ou hipersensibilidade a corpos estranhos. Em casos de suspeita, exames devem ser realizados no paciente;
- Qualidade óssea inferior ou insuficiente para ancorar firmemente o implante;
- Infecção localizada na área operatória ou infecção generalizada que possa comprometer o sucesso do procedimento cirúrgico;
- Doenças mentais profundas ou pacientes que não obedecem às orientações pós-operatórias e resistem às fases do tratamento;
- Todas as outras condições médicas ou cirúrgicas que comprometam o processo de uma cirurgia de implante (presença de tumores malignos, ou presença de anomalias congênitas graves);



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

- História recente de infecção sistêmica ou localizada; Sinais de inflamação local; Instabilidade grave devido à ausência de integridade estrutural do tecido;
- O tratamento de grupos de risco é desaconselhável;
- Qualquer condição médica ou cirúrgica que possa comprometer o sucesso do procedimento cirúrgico.
- 3. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte

# PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR ESTERILIZAR ANTES DO USO

#### 3.1 Precauções e Advertências

A seleção correta do implante é extremamente importante. Os implantes só podem ser implantados por cirurgiões familiarizados com questões gerais da cirurgia bucomaxilofacial e que dominem as técnicas cirúrgicas de implantação de implantes. Antes de usar o implante, o cirurgião é solicitado a estudar cuidadosamente as recomendações, advertências e precauções. Antes do uso, deve-se observar a integridade dos implantes e instrumentais (não objeto deste processo de registro), e não devem apresentar trincas ou abrasões. Os implantes devem ser devidamente esterilizados antes do uso. O implante deve ser selecionado de acordo com a técnica utilizada e a necessidade do paciente, levando em consideração o tipo de patologia e o local onde será implantado.

Cada tipo de patologia tem sua individualidade, seja da parte biológica ou do próprio trauma em questão, pois não existe uma regra geral que se aplique a todos os casos, é certo que o cirurgião deve ter não apenas um amplo conhecimento anatômico da região a ser operada, bem como amplo conhecimento sobre a osteotomia a ser realizada. O manuseio correto do implante é extremamente importante. O cirurgião deve evitar fazer marcas, arranhar ou deixar cair o dispositivo, o que pode causar danos internos. Se isso ocorrer, o implante deve ser descartado. Evite o contato com objetos rígidos que possam danificar o produto.

O fabricante não recomenda um procedimento cirúrgico específico para um paciente específico. O cirurgião é o único responsável pela escolha do implante adequado para o caso específico. A responsabilidade pelo tratamento e acompanhamento, bem como a decisão de manter ou explantar o implante, é do cirurgião. O médico deve estar totalmente familiarizado com o procedimento, por exemplo:

- Estudar cuidadosamente a Instrução de Uso do sistema;
- · Revisar cuidadosamente a literatura profissional atual;
- Consultar colegas com experiência no uso deste sistema, prática no manuseio e prática no procedimento cirúrgico:
- Os implantes são geralmente projetados para permanecer no corpo temporariamente e serem removidos após a cicatrização (osso).

A seleção adequada do tamanho, modelo e desenho do implante aumenta a possibilidade de sucesso do tratamento cirúrgico. O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a resistência dos implantes. Qualquer implante metálico que já tenha sido utilizado deve ser descartado.

# ## TRAUMASERV

## Instrução de Uso

# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do cirurgião, cabendo ao cirurgião a escolha final do método, tipo e tamanho dos produtos a serem utilizados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

- Efetue a esterilização dos implantes de acordo com as instruções;
- Manuseie os parafusos exclusivamente em ambientes adequados (ambulatórios ou salas cirúrgicas) com os devidos cuidados (só devem ser manuseados com luvas estéreis);
- Os parafusos só devem ser aplicados após a perfuração do osso com a respectiva broca, em seguida devem ser aplicadas as placas apropriadas;
- A escolha da técnica de perfuração e preparo para inserção de parafusos e placas é de responsabilidade do cirurgião;
- Manusear chaves de fenda e brocas exclusivamente em ambientes adequados (ambulatórios ou salas cirúrgicas) com os devidos cuidados (devem ser manuseados somente com luvas estéreis);
- A aplicação de um parafuso específico requer o uso de uma broca de dimensões adequadas e uma chave de fenda adequada para a cabeça daquele parafuso.
- O torque a ser aplicado ao parafuso durante a inserção no osso dependerá do estado e das características do osso e cabe ao médico decidir qual torque aplicar.

#### 3.2 Efeitos adversos

Os seguintes eventos adversos foram observados através de dados clínicos com produtos similares:

- Quebra de parafuso;
- Afrouxamento do parafuso levando a inflamação local e deslocamento da placa;
- Infecção;
- Retardo da cicatrização óssea;
- Exposição da placa (protrusão do implante);
- Paralisia nervosa;
- Palpabilidade da placa/parafuso;
- Deiscência;
- Formação de abscesso;
- Divergência de avanços em osteotomias;
- Quebra de placa;
- Dano neurológico.

### 3.3 Esterilização

### PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ESTERILIZAR ANTES DO USO

O sistema MCI - CMF System Placas Especiais é fornecido limpo e descontaminado, não estéril, devendo obrigatoriamente ser esterilizado antes do uso.

Para esterilização dos componentes do sistema, é recomendado a Esterilização por Vapor. Este método foi validado conforme a norma aplicável NBR 17665-1 - Esterilização de Produtos para Saúde - Vapor - Parte 1. Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos procedimentos de esterilização de

# ## TRAUMASERV

## Instrução de Uso

# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

produtos para saúde. Utilizar autoclave hospitalar, de acordo com o procedimento padrão adequado dos Centros de Materiais de Esterilização - CME.

Os parâmetros a serem utilizados e devidamente validados são:

Tipo de esterilizador: Pré-vácuo
 Pulsos de pré condicionamento: 4

Temperatura: 132°C

Tempo de ciclo completo: 4 minutos

Tempo seco: 20 minutos

O processo de esterilização deve atender a probabilidade teórica da presença de micro-organismos vitais de S.A.L. 10<sup>-6</sup> (*Sterility Assurance Level*).

As condições do equipamento (autoclave) utilizado durante o processo de esterilização (programa de calibração, manutenção etc.), bem como a garantia da utilização de um processo de esterilização adequado e a comprovação da esterilidade do produto é responsabilidade do pessoal habilitado (central de material) do serviço de saúde.

#### 3.4 Manuseio de Material Esterilizado

- É fundamental lavar as mãos com água e sabão antes de manusear o material esterilizado;
- Utilizar material com embalagem íntegra, seca, sem manchas, com identificação (tipo de material e data da esterilização);
- · Trabalhar de frente para o material;
- Manipular o material ao nível da cintura para cima;
- Evitar tossir, espirrar, falar sobre o material exposto;
- Certificar-se da validade e adequação da embalagem;
- · Trabalhar em ambiente limpo, calmo, e sem corrente de ar;
- Manter certa distância entre o corpo e o material a ser manipulado;
- Obedecer aos demais princípios de assepsia.

A técnica preconizada para abrir e manusear material esterilizado é:

- Abri-lo, iniciando-se pela extremidade oposta ao manipulador;
- Proteger o material exposto com o campo esterilizado que o envolva;
- Tocar com as mãos somente na parte externa do pacote;
- Não guardar como material esterilizado um pacote aberto anteriormente.

## 3.5 Cuidados para Manuseio e Transporte

- Os produtos devem ser armazenados em local limpo, arejado e ao abrigo da luz solar direta, em sua embalagem original, sob temperatura 0°C a 55°C e em umidade relativa máxima de 85%;
- A embalagem do dispositivo deve permanecer intacta, limpa e seca até o momento de uso;
- Caso seja encontrado algum dano no implante, o mesmo deve ser segregado e descartado;
- É recomendado que os produtos sejam desembalados e esterilizados antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições;



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

- A embalagem deve ser inspecionada com relação a danos;
- Qualquer implante que tenha caído, arranhado, entalhado ou tenha sofrido qualquer outro dano deve ser descartado;
- O local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade física e química;
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados;

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte também devem ser explicitados.

#### 3.6 Remoção do implante

A decisão sobre a remoção ou não do implante deve ser feito pelo cirurgião responsável juntamente do paciente ou seu representante.

O implante, após a consolidação óssea, deixa de exercer sua função. A remoção do implante deve ser seguida por um adequado pós-operatório, lembrando que a remoção também inclui os riscos associados a qualquer tipo de cirurgia, bem como os riscos associados à anestesia.

Caso o cirurgião necessite fazer a remoção para uma análise ou investigação, o implante deve ser explantado se possível, na presença de pessoa autorizada pelo importador Traumaserv. Este produto deverá ser enviado para análise conforme determinar o importador/distribuidor.

## 3.7 Descarte

Devem ser seguidas as recomendações da RDC 222 de 2018 - Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, para que não ocorra contaminação do operador e/ou do meio ambiente.

Os implantes que forem extraídos do paciente devem ser limpos e descontaminados para serem descartados em lixo hospitalar. Recomenda-se que o implante seja deformado ou cortado de forma que identifique claramente a situação de impróprio para o uso. Estes procedimentos irão assegurar a inutilização do produto a ser descartado de forma que a não ser indevidamente reutilizado.

## 3.8 Orientações ao paciente e/ou ao seu representante

O cirurgião responsável deve orientar o paciente e/ou seu representante, sobre as informações a seguir:

- Os cuidados adequados e as restrições durante o período pós-operatório. A capacidade e a vontade do
  paciente em seguir as orientações do médico cirurgião, constitui um dos aspectos mais importantes para
  o bom resultado do procedimento cirúrgico;
- O produto n\u00e3o substitui e n\u00e3o possui as mesmas caracter\u00edstitcas do osso normal e que, portanto, pode
  quebrar-se, soltar-se, deformar-se quando submetidos a esfor\u00fcos ou atividades excessivas, quando da
  n\u00e3o consolida\u00e7\u00e3o \u00f6ssea;
- Sobre a prescrição quando necessária de restrições de atividades de esforço ou práticas esportivas durante o período pós-operatório, de responsabilidade exclusiva do médico cirurgião;
- Necessidade de acompanhamento médico periódico, para analisar as condições do implante, do osso e dos tecidos adjacentes;



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

 Implantes podem interferir nos resultados dos exames por imagens, sendo assim, os portadores de implantes devem informar esse fato, quando da necessidade da realização desses exames.

### 3.9 Caracterização do limite de resistência e vida útil do produto

Embora os ensaios caracterizem que a resistência mecânica do sistema MCI - CMF System Placas Especiais seja superior às cargas exigidas para a segurança e eficácia deste sistema, quanto ao uso pretendido, os implantes utilizados nos procedimentos Bucomaxilofaciais têm como função promover a osteossíntese, fornecendo estabilidade à estrutura óssea afetada, de modo a estimular uma osteogênese associada a função do local de aplicação do produto.

Dados da literatura clínica indicam uma estabilização óssea entre 6 e 10 semanas pós cirurgia, sugerindo ao médico cirurgião de que o paciente deva evitar estresse e tensões excessivas durante este período nesta região.

O sistema foi desenvolvido para ter vida útil de acordo com o tempo necessário para que ocorra a osteogênese, encerrando então sua vida útil ao término da consolidação óssea. É necessário o monitoramento periódico para acompanhar a evolução da estabilização e/ou consolidação óssea do paciente. Após o período necessário para consolidação óssea, a não ocorrência desta, poderá acarretar falha, afrouxamento ou quebra dos componentes, diante do excesso de solicitação mecânica, sendo necessária cirurgia de revisão ou explantação.

### 3.10 Validade do produto: indeterminada

#### 3.11 Precauções relacionadas a exposição em ambientes de Ressonância Magnética Nuclear

Testes não clínicos e simulações eletromagnéticas in vitro demonstraram que o MCI - CMF System Placas Especiais é MR Condicional. Um paciente com este dispositivo pode ser examinado com segurança em um sistema de RM sob as seguintes condições:

- ✓ O campo magnético estático de 3 Tesla, apenas;
- ✓ O campo magnético gradiente deve ser inferior a 153 T/m (valor extrapolado);
- ✓ O produto do campo magnético estático e o gradiente espacial do campo magnético (produto da força) deve ser inferior a 290 T²/m (valor extrapolado);
- ✓ O sistema de RM máximo relatou uma taxa de absorção específica média de corpo inteiro (SAR) de 2,3 W/kg por 15 minutos de varredura no modo de operação normal do sistema de RM.

Sob as condições de varredura definidas, espera-se que a prótese produza um aumento máximo de temperatura de até  $(0,4\pm0,1)$  °C após 15 minutos de varredura contínua.

Em testes não clínicos, o artefato de imagem resultante do implante pode se estender até aproximadamente 53 mm, quando fotografado usando uma sequência de pulso gradiente eco e um sistema de RM de 3 Tesla. A geração de artefatos afeta as imagens ao invés de ter um efeito físico nos pacientes (ou seja, eles não ameaçam a segurança do paciente). Os contornos dos objetos metálicos não são mais bem delineados e a área ao redor fica borrada ou seu sinal é alterado, o que degrada a qualidade das imagens. Soluções iniciais, como otimização de sequência de RF, fornecem correções limitadas para as distorções (principalmente



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

distorções no plano), mas o advento de soluções multiespectrais, ou seja, SEMAC e MAVRIC, melhoram consideravelmente a qualidade da imagem.

### 4. Formas de apresentação do produto médico

Os componentes do MCI - CMF System Placas Especiais são comercializados unitariamente em embalagem de filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) selada termicamente, na condição de produto Não Estéril. Sobre a superfície externa da embalagem contém um rótulo do fabricante e um rótulo do importador (aprovado pela ANVISA) com as informações necessárias para identificação do produto, nome do fabricante (no rótulo aprovado pela ANVISA também consta, por exemplo, número do Registro ANVISA e identificação do importador). Dentro da embalagem original do fabricante contém 01 (uma) unidade do produto e 04 (quatro) etiquetas de rastreabilidade.

As imagens da forma de embalagem, modelo de rotulagem e da etiqueta de rastreabilidade são válidos para todos os componentes do MCI - CMF System Placas Especiais. As informações quanto aos componentes que compõem o sistema, as variações dimensionais de largura e espessura das embalagens estão apresentadas no item 4.4 Características da embalagem.

Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.





#### Imagem do produto embalado - Frente e Verso da embalagem final



IMPORTADO/DISTRIBUÍDO POR TRAUMASERV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RUA 6, 1450 - SL 27, RIO CLARO/SP - 13500-190 CNPJ: 26.278.328/0001-68 RT: Daila S.B.Cabral CRA/SP: 152253

Fabricado por: MCI Medical Concept Innovation Inc.

Adress: 4592 North Histus Road, Sunrise/FL, Zip Code: 33351 - U

REF A01.01.1092 QTD:: 01 LOT: 20-1376
Descrição: MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 2MM #0,6MM DIREITA Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados Nome Comercial: MCI - CMF System Placas Especiais

Material: Titânio Puro F67

materia: Intanio Puro Fo/
Produto Não Estéril - Esterilizar antes do uso Produto de Uso Único - PROIBIDO REPROCESSAR
Conservar sob temperatura 0°C a 55°C e umidade relativa 85% máx
Registro ANVISA n° 815296900XC Rev. 00 Instrução de Uso disponível no site:
www.traumaserv.com.br - Verifique a revisão da Instrução de Uso disponível no site (dever ser a
mesma dessa rotulagem). A Instrução de Uso pode ser solicitada pelo contato@traumaserv.com.br
ou pelo fone -55 (19) 3597-3797 sem custo adicional. Condições de armazenamento, conservação, ulação, advertências, precauções e instruções VER INSTRUÇÃO DE USO



Descrição: MICRO PLACA LEFORT 11F AVANÇO 2MM # 0,6MM DIREITA Cod. A01.01.1092

Lote: 20-1376 Validade: Indeterminado Reg. ANVISA 815296900XX Fabricante: MCI Medical Concept Innovation, Inc Importador: Traumaserv Com. Imp. Exp. Ltda

(01) Código GTIN

(10) Lote

(11) Data de Fabricação

Imagem do Modelo do Rótulo

Imagem do Modelo da Etiqueta de Rastreabilidade

Imagem do Data



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

#### 4.3 Simbologia

A simbologia utilizada nas embalagens e na rotulagem seguem os padrões da norma ISO 15223-1 *Medical devices* – *Symbols to be used with the medical devices labels, labelling and information to be supllied,* conforme demonstrado a seguir:

REF	Código do Produto
LOT	Número do Lote
QTD	Quantidade do produto embalado
NON	Não estéril

DD/MM/YYYY	Data de Fabricação
><	Validade
Ti	Consultar as Instruções para utilização
2	Não reutilizar

	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Manter afastado de luz solar ou calor
**	Manter seco
MR	Condicional para ressonância magnética

### 4.4 Características da embalagem

O produtos a serem importados/distribuidos pela Traumaserv, serão comercializados ao mercado em sua embalagem original, fabricada em filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), sendo um excelente termoplástico, apropriado para embalagens plásticas flexiveis, cuja função é manter a estabilidade microbiológica do material, através de fechamento termoselado.

#### Materiais utilizados:

- ✓ Bobina de filme de PEBD (Polietileno de baixa densidade) = Largura: de 60 a 450mm e Espessura: de 200 a 400 microns;
- ✓ Etiqueta couche 90x50mm (Rótulo);
- ✓ Etiqueta branca 50x50mm duplo liner 4/1 (Etiqueta de rastreabilidade).

#### 4.5 Rastreabilidade

#### 4.5.1 Etiqueta de Rastreabilidade

A etiqueta de rastreabilidade contém os requisitos estabelecidos pela norma RDC n° 594 de 2021, maiores detalhes podem ser verificados no anexo "Modelo de Rotulagem".

Para garantir a rastreabilidade dos implantes, o cirurgião ou sua equipe deve manter no prontuário do paciente as seguintes informações: siglas do nome do Paciente, data da cirurgia; nome do Cirurgião; nome do Hospital; nome do Importador; nome do Fornecedor; código do produto; número do lote e quantidades utilizadas. Essas informações devem ser também repassadas ao distribuidor do produto, que as comunica ao Importador, onde este repassa as informações ao Fabricante MCI, de modo a completar o ciclo de rastreabilidade do produto implantado.

As etiquetas de rastreabilidade fornecidas na embalagem do produto (4 unidades) devem ser utilizadas para garantir a possibilidade de investigação e rastreabilidade dos mesmos.

É necessário que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas conforme indicado abaixo:

- ✓ Etiqueta 1: Fixada no prontuário clínico do paciente;
- ✓ Etiqueta 2: Fixada no laudo entregue ao paciente;
- ✓ Etiqueta 3: Fixada no documento fiscal;



## MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00


✓ Etiqueta 4: Controle do fornecedor do material.

As informações de rastreabilidade são necessárias para notificação pelo serviço de saúde e/ou pelo próprio paciente à Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA e ao importador, quando da ocorrência de eventos adversos graves, para a condução das investigações cabíveis.

Ocorrido o Evento Adverso e a necessidade de realização de Queixa Técnica deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária - NOTIVISA, que pode ser encontrado no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA no endereço <a href="https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes link NOTIVISA">https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes link NOTIVISA</a>.

#### 4.5.2 Marcação a Laser

Os componentes do sistema que possuem área suficiente para marcação, são identificados de forma a possibilitar sua rastreabilidade através da gravação a laser do logo da empresa e do número de lote, como ilustrado na imagem a seguir:

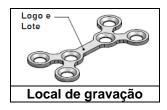

Os componentes que não possuem área suficiente para marcação são rastreados pelas informações que constam na rotulagem.

## 4.6 Instruções de Uso

Em atendimento à Instrução Normativa IN nº 4 de 2012, a Traumaserv disponibiliza as instruções de uso do MCI - CMF System Placas Especiais em meio eletrônico através do site https://www.traumaserv.com.br/. As Instruções de Uso fornecidas no formato impresso, podem ser solicitadas ao SAC sem custo adicional, inclusive de envio. As instruções de uso disponibilizadas neste website contêm controle de revisão e o usuário deve verificar na rotulagem do produto qual a revisão da instrução de uso do produto adquirido. Também deve ser verificado se o número de Registro ANVISA indicado no Rótulo é o mesmo indicado na Instrução de Uso, assim como o número da revisão, em caso de dúvidas, contate o SAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: Fone (19) 3597-3797

E-mail: contato@traumaserv.com.br

Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.

É de responsabilidade do cirurgião a escolha dos implantes, bem como o conhecimento e domínio da técnica cirúrgica a ser utilizada, devendo estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado.

A correta seleção e colocação dos parafusos são a chave para a estabilização bem sucedida de fraturas ou osteotomias. A melhor placa é inútil se não for corretamente fixada com parafusos, sendo de total responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os modelos de componentes a serem utilizados.



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

Instrução de uso durante o procedimento cirúrgico:

- ✓ Via de acesso intra ou extraoral;
- ✓ Retirada cirúrgica da lesão (tumor), correção da fratura ou correção ortognática;
- ✓ Colocação da placa/tela/malha (previamente escolhida) conformada anatomicamente sobre a superfície óssea. Uma vez moldada a placa, não deve voltar a endireitá-la, pois isso pode prejudicar a estabilidade mecânica da mesma;
- ✓ A placa/tela/malha deve ser sustentada sobre o osso, através de alicate ou pinça, para que não ocorra movimentação do componente durante a perfuração;
- ✓ Utilizar a broca, através do guia de broca para perfurar o osso (mono ou bi cortical), realizar a perfuração e a medição do tamanho do parafuso sobre a placa posicionada no local;
- ✓ Machear o canal perfurado, se desejar;
- ✓ Inserir e apertar os parafusos sobre a placa;
- ✓ Revisar todos os apertos certificando que todos estão bem firmes;
- ✓ Fechar o acesso cirúrgico.

A vida útil do implante é caracterizada pelo tempo de uso pretendido, se bem planejado, corretamente fixado e em condições ideais, o tempo de permanência é até que ocorra a consolidação óssea, porém caso a consolidação óssea não seja satisfatória, esta pode representar um risco de falha do implante por excesso de solicitação mecânica.

### 4.7 Reclamações

Caso o produto médico esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Traumaserv. Envie o produto limpo, esterilizado e acondicionado em embalagem plástica, devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua 6, nº 1460, sala 27 – 2º andar, Ed. São Lucas, Centro, Rio Claro/SP CEP: 13500-190.

Caso haja necessidade de realizar alguma reclamação referente aos produtos do MCI – CMF System Placas Especiais relacionada a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, dano, falhas no dispositivo, problemas graves ou morte relacionados com esses componentes, o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente e a TRAUMASERV através do e-mail contato@traumaserv.com.br ou pelo telefone (19) 3597-3797. Em casos de duvidas o cirurgião responsável ou o profissional de saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no site da ANVISA, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes link NOTIVISA.

As reclamações de clientes são tratadas conforme a RDC nº 67 de 2009 que dispõe sobre normas de Tecnovigilância aplicável ao detentor do registro de produtos para saúde no Brasil.

#### 5. Dados do Fabricante

MCI – Medical Concept Innovation Inc.

Adress: 4592 North Hiatus Road, Sunrise/FL, Zip Code: 33351 - USA



# MCI - CMF System Placas Especiais Rev.00

## 5.1 Importador / Distribuidor

Traumaserv Comércio Importação e Exportação Ltda

Endereço: Rua 6, nº 1460, sala 27 – 2º andar, Ed. São Lucas, Centro, Rio Claro/SP CEP: 13500-190

CNPJ: 26.278.328./0001-68

Atendimento ao Consumidor - Fone: (19) 3597-3797

E-mail: contato@traumaserv.com.br

www.traumaserv.com.br

## 6. Registro ANVISA nº: 81529690005

Instrução de uso Revisão:00 - 11/09/2023